


iDAScore™

Brugermanual

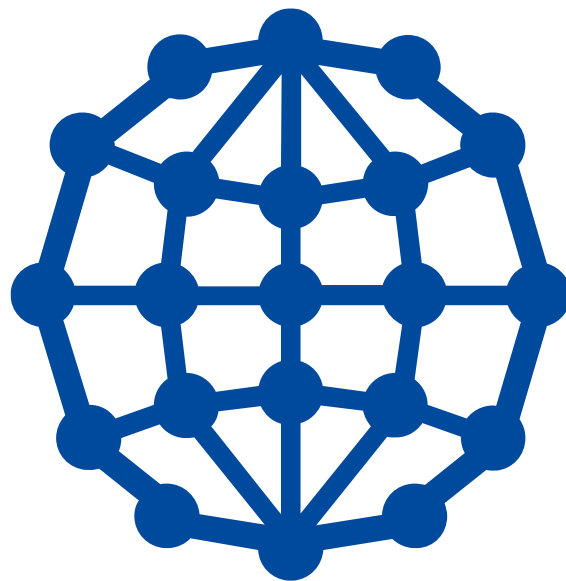

Indholdsfortegnelse

1	Indledning.....	3
1.1	Definitioner anvendt i manualen.....	3
1.2	Vigtige begrænsninger og advarsler.....	3
1.3	Generelle anbefalinger om cybersikkerhed	4
1.4	Formålet med iDAScore	4
1.5	Tilsiøtet brug	5
1.6	Indikationer for brug	5
1.7	Tilsiøtede brugere	5
1.8	Kliniske fordele.....	5
1.9	Løsningsforslag.....	5
1.10	Betingelser for at kunne anvende iDAScore.....	6
2	Vitrolife Technology Hub.....	6
3	iDAScore – grundlæggende funktioner.....	8
4	Tildeling af scorer til embryonerne.....	10
5	Udvælgelse af embryoner	11
5.1	Billeder, timelapse-videoer og annoteringer	11
6	Afslutning og rapportgenerering	13
7	Symboler og mærkater	17
8	Affaldshåndtering	18
9	Kontaktoplysninger	18

CohortView, CulturePro, EmbryoScope, EmbryoSlide, EmbryoViewer, Guided Annotation, iDAScore og KIDScore er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Vitrolife-koncernen.

©2021 Vitrolife A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

1 Indledning

Denne brugermanual beskriver, hvordan man anvender iDAScore, som har til formål automatisk at identificere de embryoner, hvor chancen for implantation er størst.

I brugermanualen dækker alle referencer til "EmbryoScope" timelapse-inkubatorer af typerne EmbryoScope+, EmbryoScope Flex og EmbryoScope 8.

Alle referencer til "EmbryoSlide" dækker dyrknings-skåle af typerne EmbryoSlide+, EmbryoSlide+ ic8 og EmbryoSlide Flex.

Alle skærbilleder i brugermanualen viser den engelske version af softwaren. De relevante oversættelser findes i den tilhørende tekst.

1.1 Definitioner anvendt i manualen

BEGRÆNSNINGER I ANVENDELSEN: Funktioner eller handlinger, der er begrænset til en række udpegede personer eller formål, eller regulatoriske begrænsninger, som SKAL overholdes ved brug af iDAScore.

ADVARSEL: Forhold eller handlinger, som kan føre til fejlagtige data eller uopretteligt tab af data, hvis instruktionerne ikke følges.

FORSIGTIG: Vigtige oplysninger, som der skal tages højde for før eller under brugen af iDAScore.

BEMÆRK: Uddybende forklaringer eller supplerende oplysninger.

1.2 Vigtige begrænsninger og advarsler

Alle brugere af iDAScore skal indvillige i at læse og forstå denne brugermanual, overholde begrænsningerne i anvendelsen og læse følgende advarsler.

Brugeren skal omgående kontakte Vitrolife og indberette eventuelle hændelser og/eller skader på patienter, brugere eller servicemedarbejdere, som direkte eller indirekte skyldes brug af udstyret og den tilhørende hardware. Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med udstyret, bør indberettes til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren er etableret.

BEGRÆNSNINGER I ANVENDELSEN

- Alle rettigheder til iDAScore tilhører Vitrolife A/S. Installation og brug af iDAScore er underlagt betingelserne i slutbrugerlicensaftalen.
- Det er ikke tilladt at kopiere, ændre, dekompile, foretage reverse engineering af, disassemblere eller konvertere iDAScore eller at overdrage, overføre, sælge, udleje eller lease iDAScore til en tredjepart.

ADVARSEL

- iDAScore tildeler en score til hvert embryo. Statistisk set er chancen for en vellykket implantation mindst for embryoner med en lav score og størst for embryoner med en høj score. Brugeren skal altid selv vurdere kvaliteten af alle relevante embryoner og derefter træffe beslutning om, hvilke(t) embryo(er) der skal oplægges, nedfryses eller undgås.

FORSIGTIG

- iDAScore må kun anvendes til de tilsigtede formål, som er beskrevet af Vitrolife A/S, da enhver anden brug kan resultere i, at embryologen træffer en forkert beslutning.

BEMÆRK

- Alle navne og behandlingsdata i denne manual er fiktive.

1.3 Generelle anbefalinger om cybersikkerhed

Det anbefales og forventes, at brugeren træffer følgende forholdsregler for at reducere cybersikkerhedsrisikoen med henblik på at sikre, at udstyret fungerer korrekt i de tilsigtede brugeromgivelser:

- Sikrer, at personalet har fået den nødvendige uddannelse i cybersikkerhedsbevidsthed
- Forhindrer, at uautoriserede brugere har fysisk adgang til udstyret
- Anvender stærke adgangskoder (mindst otte tegn, herunder både store og små bogstaver, tal og mindst ét specialtegn).

Brugeren skal underrette Vitrolife A/S uden ugrundet ophold efter at have fået kendskab til en cybersikkerhedsrisiko eller en anden formodet sikkerhedshændelse.

1.4 Formålet med iDAScore

iDAScore har til formål automatisk at identificere de embryoner, hvor chancen for implantation er størst. Det er et hjælpværktøj til at træffe kliniske beslutninger, og den endelige vurdering og beslutning skal træffes af en uddannet embryolog eller tilsvarende.

iDAScore tildeler en score til hvert enkelt embryo ud fra en algoritme, der er baseret på et neuralt deep learning-netværk, og som forudsiger levedygtigheden af embryoner, der dyrkes i et EmbryoScope-timelapse-system. iDAScore modtager de oplysninger, der bruges til at tildele embryonerne en score, fra klinikkens ES server. Klinikkens ES server modtager billeddata fra de tilsluttede EmbryoScope-inkubatorer og annoteringsdata fra EmbryoViewer-softwaren.

FORSIGTIG

- iDAScore tildeler en score til hvert enkelt embryo i den valgte EmbryoSlide-dyrkningsskål. Scoren kan understøtte embryologens beslutning, men beslutningen må aldrig baseres på scoren alene.

iDAScore er klassificeret som klasse I i henhold til og opfylder kravene i forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

1.5 Tilsigtet brug

Udstyret evaluerer embryonets tidlige udvikling ved hjælp af optagne timelapse-videoer med henblik på at understøtte udvælgelsen af embryoner. Udstyret tildeler en score til hvert enkelt embryo og identificerer derved de embryoner, hvor chancen for implantation er størst. Udstyret er et hjælpeværktøj til at træffe kliniske beslutninger, og den endelige vurdering og beslutning skal træffes af en uddannet embryolog eller tilsvarende.

1.6 Indikationer for brug

iDAScore er beregnet til evaluering af embryoner fra IVF-patienter. iDAScore skal anvendes sammen med et EmbryoScope-timelapse-system.

1.7 Tilsigtede brugere

Embryologer, andet laboratoriepersonale og klinikpersonale på IVF-klinikker.

1.8 Kliniske fordele

iDAScore er tilbehør til medicinsk udstyr og har således den indirekte kliniske fordel, at det forbedrer beslutningsprocessen ved at understøtte udvælgelsen af embryoner, der inkuberes i den eller de inkubatorer, som er tilsluttet systemet.

1.9 Løsningsforslag

Der findes på nuværende tidspunkt ingen kendte fejl og begrænsninger i iDAScore.

1.10 Betingelser for at kunne anvende iDAScore

Du skal bruge følgende for at kunne anvende iDAScore:


- En EmbryoScope-inkubator
- EmbryoViewer-software
- ES server med en gyldig licensfil.

Kvaliteten af timelapse-videoen er også vigtig. Du skal sikre, at:

- Embryonet er korrekt oprenset og fri for fx cumulusceller
- Hele embryonet er synligt, når dyrkningsskålen indsættes i inkubatoren
- Embryonet ligger midt i brønden og er i fokus i hele dyrkningsperioden
- Der ikke er luftbobler i brønden.

2 Vitrolife Technology Hub

Start et modul i Vitrolife Technology Hub ved at dobbeltklikke på Vitrolife Technology Hub-genevjen på skrivebordet, eller start programmet fra startmenuen i Windows. Herefter vises startsiden af Vitrolife Technology Hub med de moduler, der anvendes i klinikken.

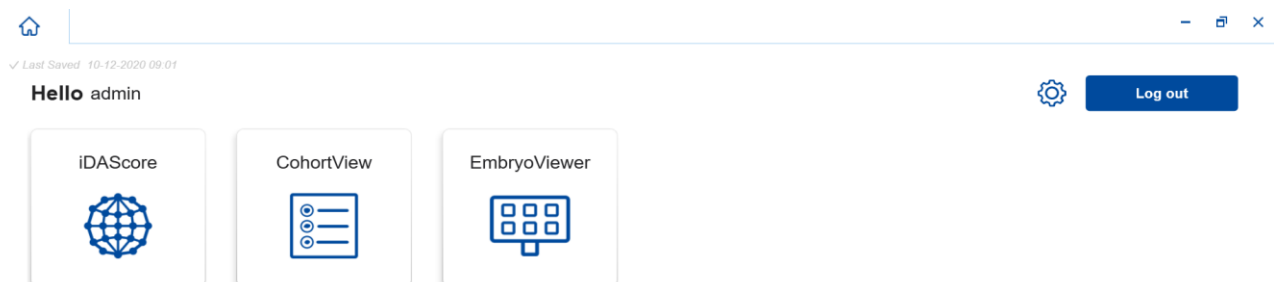

Klik på et modul for at åbne det. Hvis du åbner mere end et modul, åbnes hvert modul på en ny fane. Du kan lukke en hvilken som helst åben fane ved at klikke på krydset på fanen.

Indstillingsikonet ved siden af knappen **Log out** (Log ud) giver adgang til en række system- og modulindstillinger.



✓ Last Saved 10-12-2020 09:05

< **Dashboard**

System Settings

Language

English (United Kingdom) 

Automatic Logout After Inactivity

10

Minutes



Platform Version

1.2.0

Module Settings

iDAScore 

CohortView 


Under **System Settings** (Systemindstillinger) kan du vælge mellem forskellige visningssprog på rullelisten **Language** (Sprog), angive, hvor lang tid der skal gå, før brugeren automatisk bliver logget af, under **Automatic Logout After Inactivity** (Automatisk aflogging ved inaktivitet) og se den aktuelle platformsversion under **Platform Version** (Platformsversion).

Under **Module Settings** (Modulindstillinger) kan du se den aktuelle version af det enkelte modul og modulets unikke udstyrsidentifikationskode (UDI-kode). Klik på pilen ud for modulnavnet for at vise eller skjule disse oplysninger.

Klik på linket **Dashboard** for at vende tilbage til moduloversigten.

3 iDAScore – grundlæggende funktioner

Når du åbner iDAScore, er felterne på forsiden tomme.

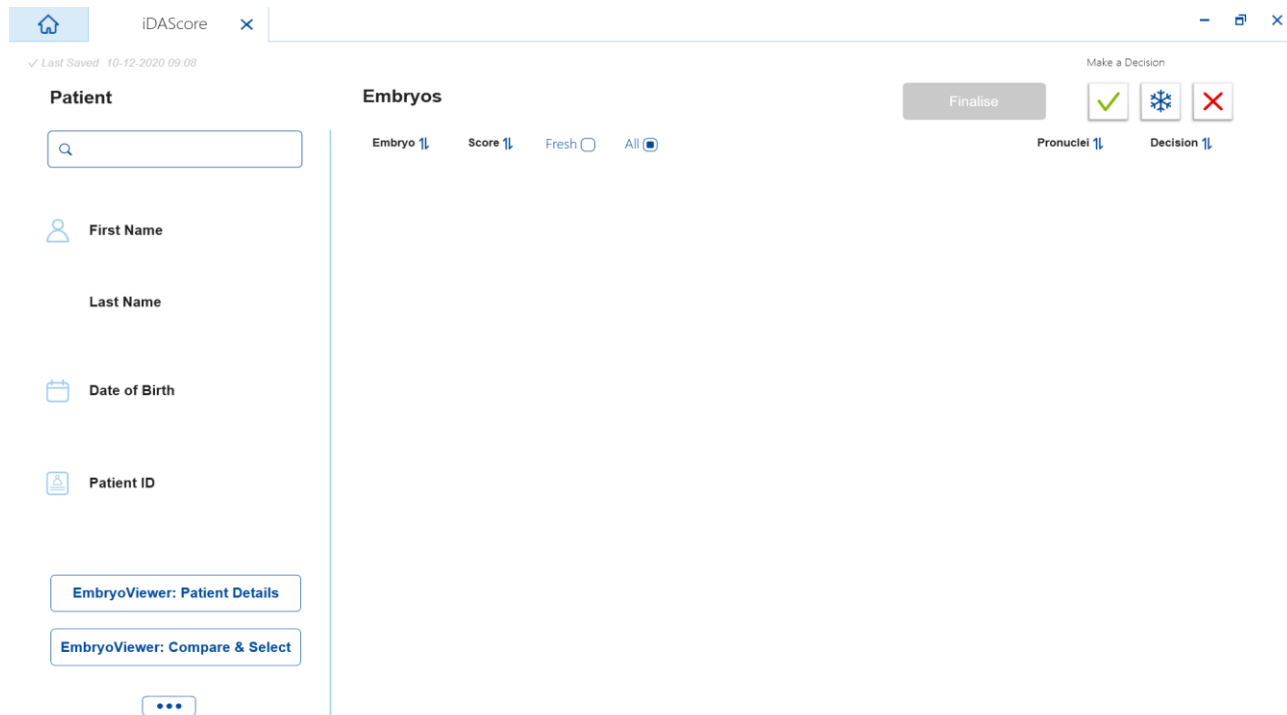

Indtast et patientnavn, et patient-ID eller et behandlings-ID i søgefeltet i venstre side af skærbilledet for at søge efter en bestemt patient eller behandling.

Patientens data indsættes automatisk i felterne **First Name** (Fornavn), **Last Name** (Efternavn), **Date of Birth** (Fødselsdato) og **Patient ID** (Patient-ID), og der beregnes scorer for patientens embryoner. Scorerne vises i højre side af skærmbilledet. Vælg **Fresh** (Friske), hvis du kun vil have vist scorer for friske embryoner, eller vælg **All** (Alle), hvis du vil have vist scorer for både friske og frosne embryoner. Friske embryoner er embryoner, der er blevet befrugtet inden for de seneste 10 dage.

The screenshot shows the iDAScore interface. On the left, the 'Patient' section displays details for Sophia Brown - 005, including First Name (Sophia), Last Name (Brown), Date of Birth (01-02-1990), and Patient ID (005). Below this are two buttons: 'EmbryoViewer: Patient Details' and 'EmbryoViewer: Compare & Select'. The main area is titled 'Embryos' and features a table with columns for Embryo ID, Score, Fresh/All status, Pronuclei, and Decision. The table lists embryos AB-1 through AB-10 with their respective scores and decision icons. A 'Finalise' button and 'Make a Decision' options (checkmark, snowflake, and X) are visible at the top right of the embryo list.

Embryo	Score	Fresh	All	Pronuclei	Decision
AB-1	3.7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AB-2	2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AB-3	2.0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AB-4	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 PN!	
AB-5	9.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AB-6	4.5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AB-7	7.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AB-8	8.9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AB-9	4.0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AB-10	1.9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Du kan sortere beregningerne efter embryon-ID, score eller antallet af prokerner. Hvis der er truffet en beslutning for embryonerne (se afsnit 5), kan du også sortere efter beslutning. Klik på en af overskrifterne én gang for at sortere dataene i faldende rækkefølge eller to gange for at sortere dataene i stigende rækkefølge. Beregningerne vises som standard efter embryon-ID i stigende rækkefølge. Hvis du vælger en anden sortering, nulstilles visningen, næste gang du åbner patientens data.

Hvis du vil se detaljerede oplysninger om patienten og behandlingen eller anvende en scoringsmodel på patientens embryoner, kan du klikke på de to knapper i nederste venstre hjørne af skærmbilledet til at gå direkte til siderne **Patient Details** (Patientoplysninger) eller **Compare & Select** (Sammenlign & udvælg) i EmbryoViewer-softwaren. Du kan finde flere oplysninger om disse sider i brugermanualen til EmbryoViewer-softwaren.

[EmbryoViewer: Patient Details](#)

[EmbryoViewer: Compare & Select](#)

Klik på knappen med de tre prikker i nederste venstre hjørne af skærbilledet for at gå direkte over i et andet modul i Vitrolife Technology Hub. Vælg en af mulighederne på den liste, der vises, når du klikker på knappen.



4 Tildeling af scorer til embryonerne

Alle embryoner tildeles en numerisk score mellem 1 og 9,9, og scorebjælken er mørkegrå, indtil du træffer en beslutning for embryonet (se afsnit 5). Hvis der ikke kan beregnes en score, er scorebjælken lysegrå. Hold musen hen over den lille streg i kolonnen **Score** for at få vist flere oplysninger.



FORSIGTIG
<ul style="list-style-type: none"> • Dyrkningsskålen skal indsættes i inkubatoren inden for 24 timer efter inseminationen. Ellers kan der ikke beregnes en score. • Der vises ingen oplysninger, hvis dyrkningsskålen har været i inkubatoren i under 112 timer.

Statistisk set er chancen for en vellykket implantation størst for embryoner med en høj score. Den endelige beslutning om, hvilke embryoner der skal oplægges, nedfryses eller undgås, skal altid træffes af embryologen efter en grundig vurdering af hvert enkelt embryon. Scoren kan understøtte embryologens beslutning, men beslutningen må aldrig baseres på scoren alene.

Hvis et embryon ikke har to prokerner (PN), vises der ingen score, og der vises et advarselssymbol (!) efter PN-værdien under **Pronuclei** (Prokerner). Du kan ændre PN-værdien manuelt, hvis der er behov for det (se afsnit 5.1).



Hvis antallet af prokerner ikke kan beregnes og PN-værdien ikke er blevet anoteret eller er blevet anoteret som **NA** (Ikke vurderbart), vises der en score for embryonet og et advarselssymbol under **Pronuclei** (Prokerner). Hold musen hen over advarselssymbolet for at få vist flere oplysninger.



5 Udvalgelse af embryoner

Når scorerne for en patients embryoner vises på skærmen, kan du bruge beslutningsknapperne under **Make a decision** (Træf en beslutning) til at angive, hvilke embryoner der skal oplægges (grønt ikon), nedfryses (blåt ikon) eller undgås (rødt ikon). Beslutningsknappen med det grønne ikon bruges til at udvælge både friske og frosne embryoner til oplægning. Når du klikker på en af knapperne, vises knappens ikon ved siden af markøren, og der vises et afkrydsningsfelt ud for hvert embryo under **Decision** (Beslutning). Klik i afkrydsningsfeltet ud for alle de embryoner, som beslutningen skal gælde for. Klik på den samme beslutningsknap igen for at skifte tilbage til normal brug af markøren, eller klik på en af de andre beslutningsknapper for at træffe en anden beslutning for et eller flere embryoner.

Hvis du vil ændre en beslutning, skal du klikke på den relevante beslutningsknap og derefter klikke i afkrydsningsfeltet ud for det pågældende embryo. Markeringen i afkrydsningsfeltet fjernes nu.

Når du træffer en beslutning for et embryo, skifter embryonets scorebjælke farve. Den bliver grøn for embryoner, der skal oplægges i frisk cyklus, blå for embryoner, der skal nedfryses, og lilla for embryoner, der skal oplægges i frysecyklus. For embryoner, der skal undgås, bliver hele rækken nedtonet.

The screenshot shows the 'Embryos' section of the iDAScore interface. At the top right, there is a 'Make a Decision' header and a 'Finalise' button. Below this are three decision icons: a green checkmark, a blue snowflake, and a red X. The main area contains a table of embryos with columns for 'Embryo', 'Score', 'Fresh', 'All', 'Pronuclei', and 'Decision'. Each row represents an embryo with its ID, score, a progress bar, and decision icons.

Embryo	Score	Fresh	All	Pronuclei	Decision
AB-5	9.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
AB-7	7.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
AB-8	8.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
AB-9	4.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

5.1 Billeder, timelapse-videoer og annoteringer

I iDAScore kan du se billeder og timelapse-videoer af embryonerne, som kan hjælpe dig med at træffe beslutninger. Hold musen hen over øjesymbolet uden at klikke på det for at se det sidste billede, der er taget af et embryo.

This close-up shows the row for embryo AB-5 with a score of 9.1. The eye icon in the decision column is highlighted with a red square, indicating that hovering over it will show the latest image of the embryo.

Hvis der er føjet kommentarer til billedet, vises de ved siden af billedet.

Embryo Comment AB-5

AB-2	2.1	<div style="width: 20%;"></div>		
AB-3	2.0	<div style="width: 20%;"></div>		
AB-4	-	<div style="width: 0%;"></div>		
AB-5	9.1	<div style="width: 100%;"></div>		
AB-6	4.5	<div style="width: 50%;"></div>		

Decision 1

Klik på pilen for at få vist flere oplysninger om embryoet.

AB-5 | 9.1

Der åbnes nu en ny side med yderligere oplysninger og valgmuligheder.

iDAScore

✓ Last Saved 13-01-2021 09:52

Patient Overview

First Name Sophia **Last Name** Brown

Date of Birth 01-02-1990 **Patient ID** 005

AB-5

Treatment X9X92020

Score 9.1 **PN** 2

Comment

Make a Decision

EmbryoViewer: Annotation

117.3h

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5

75 60 45 30 15 0 -15 -30 -45 -60 -75

I venstre side kan du se patientoplysningerne og scoren fra den foregående side. Du kan også se, hvilken behandling embryonet stammer fra, og antallet af prokerner. Der vises et advarselssymbol (!) ud for feltet **PN**, hvis antallet af prokerner ikke kan beregnes og ikke er blevet annoteret. Du kan ændre antallet af prokerner direkte i feltet **PN**. Ændringen slår automatisk igennem i EmbryoViewer-softwaren. I feltet **Comment** (Kommentar) under disse oplysninger kan du indtaste eventuelle kommentarer. Beslutningsknapperne fra den foregående side vises også her.

Klik på knappen **EmbryoViewer: Annotation** for at gå direkte til siden **Annotate** (Annoter) i EmbryoViewer-softwaren, hvis du vil foretage annoteringer eller se eksisterende annoteringer i EmbryoViewer-softwaren. Du kan finde flere oplysninger om annotering i brugermanualen til EmbryoViewer-softwaren. Klik på knappen **IDA** i EmbryoViewer-softwaren for at vende tilbage til iDAScore.

I højre side kan du afspille en timelapse-video af embryonet. Brug afspilningsknapperne under videoen til at starte afspilningen eller sætte den på pause (midterste knap) eller til at gå et billede tilbage (venstre knap) eller frem (højre knap). Du kan også trække i skyderen eller klikke et vilkårligt sted på den vandrette bjælke under videoen for at gå til et bestemt tidspunkt. Hvis du hellere vil bruge tastaturet, skal du trykke på henholdsvis venstre eller højre piletast for at gå et billede tilbage eller frem. Dette er nyttigt, hvis du ønsker at gennemse embryonet for specifikke detaljer. Hold piletasterne nede for at spole hurtigt tilbage eller frem, eller tryk på mellemrumstasten når som helst for at starte eller stoppe afspilningen.


Du kan justere videoens lysstyrke (den øverste skyder) og kontrast (den nederste skyder) med de to skydere ved siden af afspilningsknapperne.

Træk i skyderen eller klik et vilkårligt sted på den lodrette bjælke til højre for videoen for at skifte fokalplan. Alternativt kan du bruge pil op- og pil ned-tasterne på tastaturet.


Klik på linket **Patient Overview** (Patientoversigt) for at vende tilbage til oversigtssiden, når du har gennemset oplysningerne om embryonet. Hvis du har foretaget ændringer eller tilføjet kommentarer, bliver de automatisk gemt.

6 Afslutning og rapportgenerering

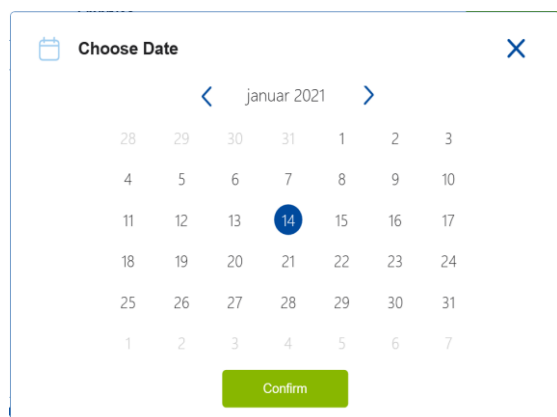


Klik på knappen **Finalise** (Afslut), når du har truffet en beslutning for alle relevante embryoner. Du bliver nu bedt om at vælge en dato. Vælg en dato på den viste kalender, og klik på **Confirm** (Bekræft).



Der vises nu en beslutningsrapport over alle de embryoner, som du har truffet en beslutning for. På den første side i rapporten kan du se, hvor mange embryoner der skal oplægges i frisk cyklus, nedfryses, oplægges i frysecyklus eller undgås.

14-01-2021


Embryo Decision Report

 **First Name** Sophia **Last Name** Brown  **Date of Birth** 01-02-1990  **Patient ID** 005

Summary

Decision Date 14-01-2021

Decision	Number
<input checked="" type="radio"/> Transfer	1
<input checked="" type="radio"/> Freeze	5
<input type="radio"/> FET	0
<input type="radio"/> Avoid	9

Close Save 

Den eller de næste sider indeholder oplysninger om de embryoner, som du har truffet en beslutning for, og den dyrkningsskål og det instrument, som de blev inkuberet i. Der genereres en side for hver dyrkningsskål med embryoner, som du har truffet en beslutning for. Illustrationen viser, hvilke brønde i dyrkningsskålen der indeholder embryoner, som skal oplægges (grøn), nedfryses (blå) og undgås (grå).



First Name
Sophia

Last Name
Brown



Date of Birth
01-02-1990



Patient ID
005

Culture Dish AB


Treatment X9X92020

Dish ID D2000.01.01_S10006_I0002_P

Instrument ES+ 0002

Hours Past Insemination 117.4

Embryo	Score	Decision
AB-5	9.1	● Transfer
AB-7	7.2	● Freeze
AB-8	8.9	● Freeze

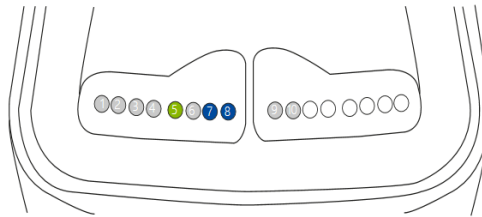

First Name
Sophia

Last Name
Brown



Date of Birth
01-02-1990



Patient ID
005

Culture Dish AA



Treatment Y2Y22020

Dish ID D2000.01.01_S10005_I0001_P


Instrument ES+ 0001


Hours Past Insemination 120.8

Embryo	Score	Decision
AA-3	9.2	● Freeze
AA-4	9.4	● Freeze
AA-5	5.8	● Freeze

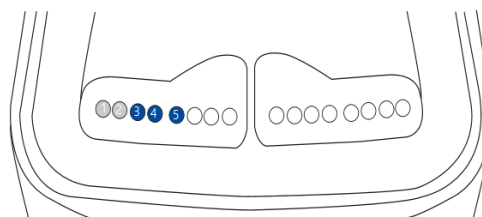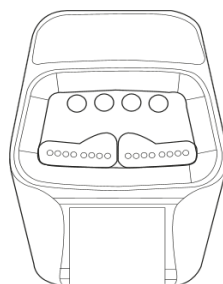



På den sidste side i rapporten vises der en liste over alle embryoner, som skal undgås, med oplysninger om behandling, dyrkningskåls-ID og brøndnummer.

14-01-2021

 **First Name**
Sophia


Last Name
Brown

 **Date of Birth**
01-02-1990

 **Patient ID**
005

Avoid

Treatment	Dish ID	Well
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	1
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	2
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	3
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	4
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	6
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	9
X9X9_2020	D2000.01.01_S10006_I0002_P	10
Y2V2_2020	D2000.01.01_S10005_I0001_P	1
Y2V2_2020	D2000.01.01_S10005_I0001_P	2


Close Save 

Klik på **Close** (Luk) for at lukke rapporten uden at gemme den, eller klik på **Save** (Gem) for at gemme rapporten som pdf-fil på en placering efter eget valg. Klik på printerikonet, hvis du vil udskrive rapporten.

Når du har afsluttet dine beslutninger, vises de embryoner, der skal oplægges eller undgås, ikke længere. Der vises kun frosne embryoner og embryoner, som du ikke har truffet en beslutning for, og visningen skifter automatisk til **All** (Alle). Hvis patienten har frosne embryoner fra tidligere behandlinger, vises de også.

The screenshot shows the iDAScore web application interface. On the left, the 'Patient' section displays details for Sophia Brown - 005, including her first name, last name, date of birth, and patient ID. The main area is titled 'Embryos' and lists five embryos (AB-7, AB-8, AA-3, AA-4, AA-5) with their respective scores (7.2, 8.9, 9.2, 9.4, 5.8) and progress bars. Each embryo row includes icons for viewing, freezing, and deleting. At the top right, there are buttons for 'Finalise', 'Make a Decision' (with checkmark, freeze, and delete icons), and sorting options for 'Pronuclei' and 'Decision'.

7 Symboler og mærkater

Mærkat	Beskrivelse	Kommentarer
	Producentens erklæring om, at udstyret opfylder alle gældende krav i forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr	-
	Medicinsk udstyr	-
	Producentens navn og adresse	Se afsnit 9.

8 Affaldshåndtering

For at minimere affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal affald bortskaffes i overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) som ændret ved direktiv (EU) 2018/849. Dette omfatter: PCB'er (blyfri HASL), kontakter, pc-batterier, printplader og eksterne elkabler. Alle komponenter opfylder kravene i direktiv 2011/65/EU (RoHS 2-direktivet) om, at nye elektriske og elektroniske komponenter ikke må indeholde bly, kviksølv, kadmium, heksavalent krom, polybrominerede bifenylter (PBB) eller polybrominerede difenylætere.

9 Kontaktoplysninger

Har du brug for hurtig hjælp? Ring til vores servicehotline for at få support:

+45 7023 0500

(åben 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage)

E-mailsupport: support.embryoscope@vitrolife.com

(svar inden for 2 arbejdsdage)



Vitrolife A/S
Jens Juuls Vej 20
8260 Viby J
Danmark

Telefon: +45 7221 7900

Hjemmeside: www.vitrolife.com

Vitrolife

VITROLIFE A/S, DANMARK